

unlockcapture&share





Nous vous présentons notre nouvelle MoticamX et la technologie MoticHUB, deux méthodes uniques pour upgrader instantanément votre microscope.

Ne vous débarrassez plus de vos anciens microscopes, par les temps qui courent de restrictions budgétaires, ré-utilisez le matériel dans lequel vous aviez investi, c'est une meilleure option que de le jeter. Motic a développé deux solutions uniques afin de transformer n'importe quel microscope en un appareil compatible avec une tablette sans fil.

X



motic'sfreeapp



MotiConnect

MoticamX



La **moticam X**, comme toutes nos autres Moticam est un produit “All-In-One-Box”. Ce qui fait que cette caméra est un cran au dessus de toutes les autres c’est parce que c’est une **caméra** en streaming **WiFi** haute résolution. Elle peut créer son propre réseau sans câble, reliée à votre tablette Android ou iOS, et ainsi **visionnez, capturez, et éditez des images live** de votre microscope via votre **App MotiConnect gratuite**.

Dans l’hypothèse où votre école ne vous permette pas le téléchargement des Apps et que vous ayez néanmoins besoin de l’utiliser dans l’urgence, pas de problème car la MoticamX est équipée de son propre **logiciel intégré** qui **peut être contrôlé par un simple navigateur** qui vous permettra de capturer, mais également de mesurer. La volonté de Motic est d’équiper toutes nos solutions avec des outils d’enseignement standards. La MoticamX fonctionne également avec un ordinateur portable équipé WiFi, fonctionnant sous XP ou système opératif plus avancé, dans ce cas la caméra peut être utilisée avec notre logiciel standard Motic images Plus 2.0, donc cela vous permet même d’habiliter cet appareil avec le tableau Blanc interactif de votre classe.



MoticHUB



La technologie **MoticHUB** est **intégrée** au logiciel Motic Images Plus, elle vous permettra de transformer vos Moticam ou microscopes digitaux existants en une **solution** de streaming **WiFi digitale**.

Cette **fonction gratuite** vous permettra de relier **vosre microscope digital ou votre caméra** à votre ordinateur s’il est équipé WiFi, et ensuite de streamer l’image via votre réseau déjà existant, ainsi d’autres pourront se greffer via leur **tablettes WiFi** ou ordinateurs.

iPad


08:47

Main Menu

Gallery

Live Cam

Unit

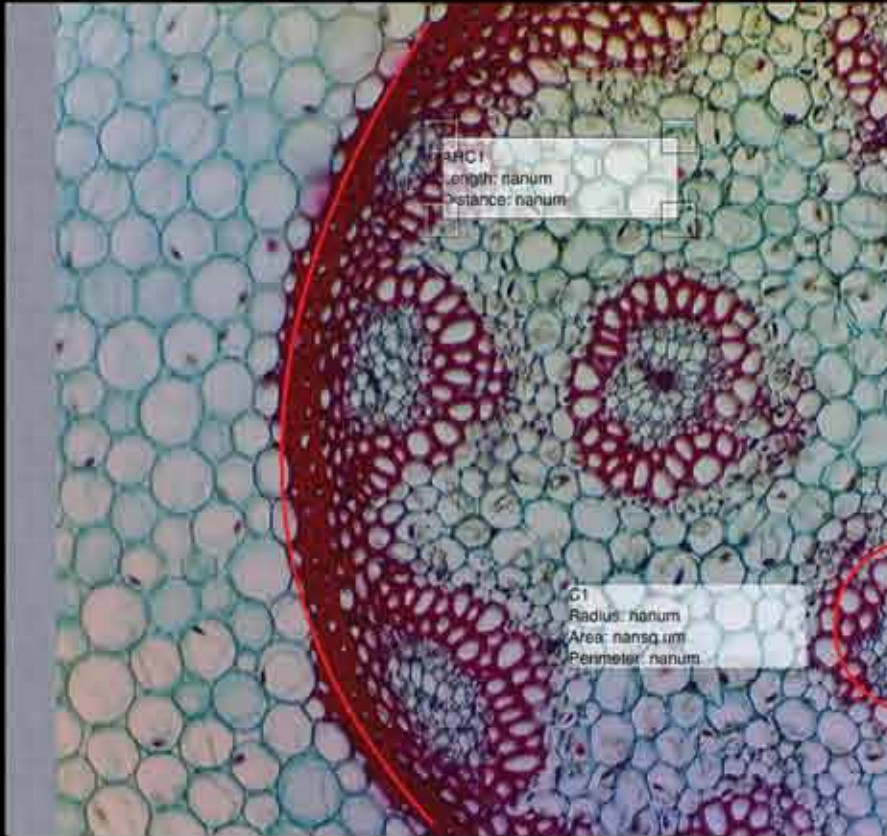

X



www.moticeurope.com

The Official European Motic Website

Moticam X

Caratéristiques Générales

Type de chip	CMOS
Résolution du chip	2.0MP
Résolution WiFi	1280x1024 pixels (1.3MP)
Calcul optique	1/3"
Lentille à mise au point réglable	12mm
Lame de calibration	Inclus
Macro Tube	Inclus
Alimentation	Via un adaptateur
Dispositifs d'images:	WiFi permettant la connexion à un PC ou PC portable: <i>Motic Images Plus 2.0 pour PC</i> Tablette ou Téléphone: <i>Téléchargement gratuit de MotiConnect sur App</i> Lecteur Universel: <i>N'importe quel navigateur ayant HTML 5</i>

DE | EN | ES | FR | IT | PT | RU