

unlockcapture&share





Con l'introduzione della nostra nuova Moticam X e della tecnologia MotichUB, offriamo due modi unici per aggiornare all'istante il vostro microscopio.

Non gettate via i vostri vecchi microscopi. In tempo di crisi, riutilizzare qualcosa in cui avete già investito è decisamente meglio che buttare via. Noi di Motic abbiamo sviluppato due soluzioni uniche per trasformare praticamente qualsiasi microscopio in un dispositivo wireless, pronto per condividere informazioni su tablet.





motic'sfreeapp



MotiConnect

Moticam X



La **Moticam X**, come tutte le nostre soluzioni Moticam, è un prodotto “All-In-One-Box”. Ciò che fa della Moticam X un taglio netto con il resto è che si tratta di una **videocamera WiFi** con alta risoluzione in streaming. Con la creazione della propria rete wireless, semplicemente accedendovi con i vostri tablet Android o iOS potrete **vedere, acquisire e manipolare le immagini** dal vivo provenienti dai vostri microscopi grazie alla nostra **gratuita App MotiConnect**.

Nel caso in cui la vostra scuola non permetta il download di Apps o abbiate bisogno di utilizzarla in fretta, nessun problema, dato che la Moticam X è fornita del suo **proprio software** che **può essere controllato semplicemente con un browser di rete**, il quale permette di acquisire immagini così come di misurarle. Noi di Motic facciamo in modo di fornire tutte le nostre soluzioni con strumenti di apprendimento come standard. La Moticam X funziona anche con qualsiasi Laptop dotato di WiFi con sistema operativo Windows XP o superiore, per cui la videocamera può essere utilizzata con il nostro software standard Motic Images Plus, abilitandovi quindi anche all'utilizzo di questo dispositivo in classe con la vostra Lavagna Interattiva.



MoticHUB



La tecnologia **MoticHUB** è **integrata** nel nostro software Motic Images Plus, permettendovi così di trasformare la vostra Moticam con cavo o Microscopio Digitale (mandatovi originariamente con il software Motic) in una **stazione digitale** per streaming **WiFi**.

Questa **caratteristica addizionale gratuita** vi permetterà di collegare **il vostro microscopio digitale o videocamera** al vostro computer WiFi e quindi di trasmettere l'immagine attraverso la vostra rete abituale in modo che altri possano connettersi dai propri **Tablet** o computer **WiFi**.

iPad


08:47

Main Menu

Gallery

Live Cam

Un

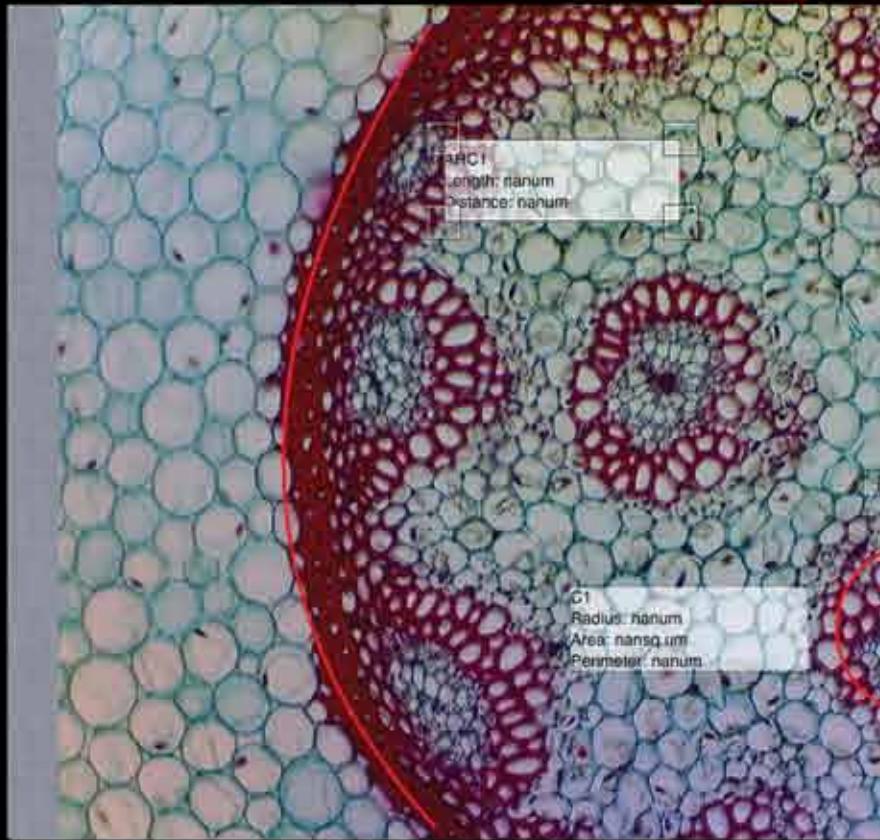



www.moticeurope.com
The Official European Motic Website

Moticam^X

Caratteristiche Tecniche

Tipo di Sensore	CMOS
Risoluzione del Sensore	2.0MP
Risoluzione WiFi	1280x1024 pixels (1.3MP)
Misurazione Ottica	1/3"
Lente Aggiustabile	12mm
Vetrino di calibrazione	Incluso
Macrotubo	Incluso
Alimentazione	Attraverso il cavo di commutazione fornito
Dispositivi di visualizzazione	PC o Laptop abilitati WiFi: <i>Motic Images Plus per PC</i> Dispositivi Tablet o Smartphone: <i>App MotiConnect scaricabile gratuitamente</i> Visualizzazione universale: <i>Praticamente ogni browser di rete che supporti HTML 5</i>

DE | EN | ES | FR | IT | PT | RU